



FR
MEDICAL

®

www.frmedical.com.mx

El chaleco de apoyo POSTHORAX™ estabiliza el esternón roto, alivia la presión sobre los cables y reduce los dolores causados por tos y durante la rehabilitación.

POSTHORAX™



Información para el paciente
y manual de usuario

WE ♥ CARE





Manual del usuario del chaleco de apoyo Posthorax®



Paso 1: Figura 1: Déjese tomar las medidas con una cinta métrica, tal como se muestra en la **Figura 1**. Empiece midiendo desde la espalda, por debajo de las axilas hasta el esternón. Si se mide por el abdomen o, en caso de mujeres, el busto, se obtendrá un talla incorrecto.

S = 60 – 70 cm
M = 70 – 90 cm
L = 90 – 120 cm
XL = 120 – 150 cm
XXL = 150 – 210 cm

Paso 2: Seleccione un chaleco de apoyo para damas o para caballeros. Las almohadillas se adaptarán ergonómicamente. De ser necesario, vuelva a colocarlas de con la parte más ancha hacia arriba. **(Las almohadillas colocadas en la posición opuesta generan la presión opuesta).**

Paso 3: Figuras 2 y 3. Cierre la hebilla y el cierre velcro – primero la hebilla superior, luego el cierre velcro inferior. Las almohadillas se encuentran a la izquierda y derecha, paralelas al esternón.

Paso 4: Figura 4: En la espalda, tire el chaleco hacia abajo, por debajo de las escápulas.

Cómo cerrar las correas laterales:

Paso 5: Figura 5: El paciente inspira – ahora tirar las dos correas laterales de manera simultánea para ajustarlas, hasta que la correa elástica esté totalmente estirada – y cerrar. El paciente exhala.

Paso 6: Figura 6: El paciente vuelve a inspirar – ahora, tirar de ambas correas laterales inferiores, hasta que la correa elástica esté totalmente estirada – y cerrar. El paciente exhala.

Observe las **Figuras 7a y 7b** muestran el mecanismo de respiración en el chaleco, tal como se describe arriba.

Las cintas elásticas de goma, unidas a las correas laterales (**mecanismo de respiración**), permiten una respiración normal, el mecanismo de tope previene que el esternón se extienda excesivamente.

Paso 7: Figura 8: Cierre las cintas una tras otra hasta lograr una ligera presión sobre los hombros. Ahora, ajuste las almohadillas para que estén derechas sobre el pecho.

Correctamente colocado: La parte frontal del chaleco cubre toda la longitud del esternón. La parte trasera se encuentra por debajo de las escápulas. El paciente debe sentir una ligera presión en el tórax por las almohadillas. El chaleco de apoyo debe contar con el suficiente espacio debajo de las axilas.

Agregar un sostén al chaleco de apoyo

- Abra el broche y el velcro
- Retire dos almohadillas
- Fije ambos lados del sostén al chaleco
- Vuelva a colocar las dos almohadillas (con la parte ancha hacia arriba)
- Presione ligeramente las almohadillas para que se fijen al sostén
- La combinación está completa
Chaleco de apoyo + sostén femenino


SI EN LA ESPALDA EL CHALECO SE MUEVE HACIA ARRIBA, NO TIRE DE LAS CORREAS, SOLO VUELVA A DESLIZAR EL CHALECO HACIA ABAJO.

CUANDO EL CHALECO ESTÁ COLOCADO, ÁBRALO SOLO CON LAS HEBILLAS FRONTALES Y EL VELCRO.

El producto es para un solo paciente

Vea el video instructivo en: www.frmedical.com.mx

Chaleco de apoyo Posthorax®

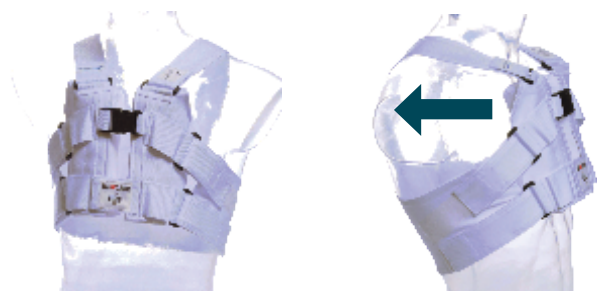

Dos acolchados, uno a cada lado del esternón, proporcionan estabilización anteposterior (delantera y trasera)

1. **Antes de la operación:**
Para poder acostumbrarse al chaleco de apoyo, se recomienda ponérselo un tiempo antes de la operación.
2. **Luego de la operación:**
Emplee a usarlo tan pronto como sea posible.
3. **¿Cuánto tiempo debe usarse?** 6 - 8 semanas.
4. **¿Cuándo debe usarse?** De día y de noche.
5. **¿Quitárselo ?** Solo durante la higiene personal.

Chaleco de apoyo esternal Posthorax® PRO

Se emplea en los hospitales para movilizar al paciente y durante la rehabilitación. El chaleco se usa hasta que la fractura haya sanado por completo (6 - 8 semanas).

Determinar el talle: con una cinta métrica, comience a medir desde la espalda, por debajo de las axilas, hasta la parte superior del tórax. Si la medida se toma por el abdomen, o en las mujeres, por el busto, se obtendrá un talle incorrecto.



Chaleco de apoyo esternal POSTHORAX®



Chaleco de apoyo esternal POSTHORAX® con sostén

Código	Producto y características	Circunferencia del tórax en cm.
150201	Chaleco de soporte esternal para infante talla extra chico "XS" color azul	50 - 60
150202	Chaleco de soporte esternal Pro Universal talla chico "S" color blanco	60 - 70
111202	Chaleco de soporte esternal para caballero talla mediano "M" color azul	70 - 90
111203	Chaleco de soporte esternal para caballero talla grande "L" color azul	90 - 120
111204	Chaleco de soporte esternal para caballero talla extra grande "XL" color azul	120 - 150
111205	Chaleco de soporte esternal para caballero talla extra extra grande "XXL" color azul	150 - 210
101202	Chaleco de soporte esternal para dama talla mediano "M" color azul	70 - 90
101203	Chaleco de soporte esternal para dama talla grande "L" color azul	90 - 120
101204	Chaleco de soporte esternal para dama talla extra grande "XL" color azul	120 - 150
101205	Chaleco de soporte esternal para dama talla extra extra grande "XXL" color azul	150 - 210
100208	Sostén para dama con copa tamaño B, fijado al chaleco de soporte esternal color blanco	Flexibilidad (80+)
100209	Sostén para dama con copa tamaño C, fijado al chaleco de soporte esternal color blanco	Flexibilidad (90+)
100210	Sostén para dama con copa tamaño D, fijado al chaleco de soporte esternal color blanco	Flexibilidad (100+)
100211	Sostén para dama con copa tamaño E, fijado al chaleco de soporte esternal color blanco	Flexibilidad (110+)

* Disponible en color blanco y azul.

Registro Sanitario No. 1443C2016SSA

Especificaciones y cuidado del chaleco de apoyo esternal POSTHORAX PRO®

Cara externa, 100% algodón
Relleno, 100% espuma de poliuretano

- 🧺 Lavar en lavarropas a no más de 70°C. **NO LAVAR EN EL HOSPITAL**
- 🧊 Planchar a baja temperatura
- Ⓢ Se puede lavar químicamente con cualquier tipo de disolvente utilizado normalmente en procesos de lavado químico, excepto tricloroetileno.
- ⌘ No utilizar blanqueadores de cloro
- ☞ Secar en secador a temperatura baja

POSTHORAX™



El chaleco de apoyo POSTHORAX™ se utiliza por 6-8 semanas luego de la operación, hasta que la fractura se haya curado por completo. Durante este período, se debe tener puesto el chaleco durante el día y la noche, como un yeso.

Sucursal Guadalajara

Tel.: 33 1728 4570
Tel.: 33 1668 0409
ventasgdl@frmedical.com.mx

Sucursal Cullacán

Tel.: 66 7335 2416
ventassin@frmedical.com.mx

Sucursal Puebla

Tel.: 22 2692 4040
ventaspu@frmedical.com.mx

Sucursal San Luis Potosí

Tel.: 44 4328 1113
ventasslp@frmedical.com.mx

Sucursal Mérida

Tel.: 99 9349 0849
ventasmid@frmedical.com.mx

Sucursal Hermosillo

Tel.: 66 2352 0229
ventasson@frmedical.com.mx

FR MEDICAL, S.A. de C.V.

Fernando González Roa No. 67
Col. Ciudad Satélite, C.P. 53100
Naucalpan de Juárez, Estado de México
Tels.: (55) 5374 1105 / (55) 5374 1133
ventasmx@frmedical.com.mx

Sucursal Morella

Tel.: 44 3356 5815
ventasnich@frmedical.com.mx

Sucursal Tijuana

Tel.: 66 4798 1170
ventastj@frmedical.com.mx

Sucursal Veracruz

Tel.: 22 9331 2416
ventasver@frmedical.com.mx

Sucursal Querétaro

Tel.: 44 2400 1855
ventasqro@frmedical.com.mx

URGENCIAS AL :
(55) 2584 • 6066
(55) 4999 • 3822

Sucursal Monterrey

Tel.: 81 1678 5455
Tel.: 81 1678 7852
ventasmt@frmedical.com.mx

Sucursal Toluca

Tel.: 22 9331 2416
ventastol@frmedical.com.mx

Sucursal Aguascalientes

Tel.: 44 9272 2022
ventasags@frmedical.com.mx

Sucursal León

Tel.: 47 7680 1576
ventasgto@frmedical.com.mx

Sucursal Chihuahua

Tel.: 61 4301 2909
ventasuu@frmedical.com.mx

Sucursal Cd. Juárez

Tel.: 65 6409 8423
ventascdj@frmedical.com.mx



Importador y Distribuidor exclusivo en México

www.frmedical.com.mx

